

Varenr. 26203 - Zenith Dental Aps.

1: Indikationer for brug

DIA-ROOT BIO Sealer er en MTA (mineral trioxide aggregate) baseret rod-sealer, som giver fuldstændig forsegling af kanalen. Den kan anvendes med eller uden rod obturationsmaterialer.

2: Instruktioner**A: Forholdsregler**

- 1: Før anvendelse kontrolleres produktet for anormaliteter, udløbsdato, urenheder og forandringer.
- 2: Læs brugsinstruktioner omhyggeligt før brug.

B: Brugsinstruktioner

- 1: Udrens og irrigér rodkanalen ved brug af standard teknikker.
- 2: Sæt tippen på sprøjten og placer tippen i rodkanalen.
- 3: Fyld rodkanalen ved langsomt at trykke materiale ind i kanalen. Undgå at bruge for megen kraft da der kan dannes bobler og/eller overfyldes.
- 4: Hvis materialet anvendes sammen med gutta percha indsættes gutta percha point i rodkanalen.
- 5: Skær toppen af. Overskydende materiale fjernes med en våd vatpellet.
- 6: Efter brug fjernes engangstippen og erstattes med en ny engangstip.
- 7: Dæk den nye engangstip med det medfølgende silikonelåg for at lukke tæt.

C: Opbevaring og behandling efter brug.

- 1: Efter brug fjernes engangstippen og erstattes med en ny engangstip, som lukkes med det medfølgende silikonelåg.
- 2: Anbringes i aluminiumsbeholder og opbevares tørt.

3: Forsigtighedsregler**A: Forsigtigt**

- 1: Dette produkt må kun anvendes af dentale professionelle og instruktioner og forholdsregler følges omhyggeligt.
- 2: Undgå kontakt med hud og øjne. Opstår der kontakt skylles med store mængder vand. Søg læge.
- 3: Lad ikke børn håndtere produktet.

B: Generelle forholdsregler.

- 1: Ukorrekt opbevaring kan forringe produktets egenskaber og afkorte shelf-life.
- 2: Anvend ikke produktet til andet formål end det er beregnet til.
- 3: Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med vand.

- 4: Anvend ikke produktet efter udløbsdatoen.
- 5: Opbevar ikke produktet i nogen anden beholder end den der leveres af fabrikanten.

C: Kontraindikationer.

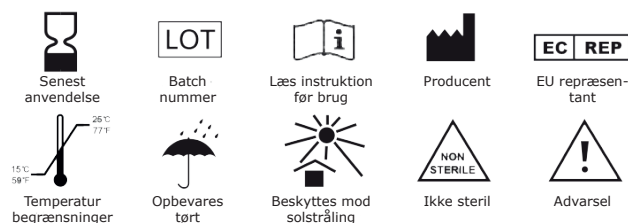
- 1: Anvend ikke til andre formål end dental rodkanalfyldning.
- 2: I sjældne tilfælde kan produktet føre til sensibilisering. Afbryd straks behandlingen og kontakt læge.

D: Forholdsregler og anvendelse.

- 1: Kofferdam skal anvendes ved behandlingen.
- 2: Tryk ikke materialet ud med for megen kraft. Det kan forårsage akut smerte hos patienten.
- 3: Fyld ikke forbi apex. Overfyldning kan forårsage smerte eller andet ubehag hos patienten.
- 4: Undgå utilsigtet kontakt med vand da materialet hærdner ved kontakt med vand.
- 5: Produktet bør opbevares i en forseglet beholder indtil brug for at forhindre reaktion med fugt i atmosfæren.
- 6: Bruges med forsigtighed da PH værdien stiger til 10-12 ved kontakt med fugtighed.
- 7: Genbrug ikke engangstips.
- 8: Dette produkt er beregnet til at forblive permanent i tanden (i mere end 30 dage).
- 9: Efter behandling tages røntgen for at kontrollere fyldningens tilstand.

4: Shelf life

2 ÅR fra produktionsdatoen når opbevares som foreskrevet.

5: Symboler**Kun til dental brug.****5: Garanti og ansvar**

DiaDent Group International erstatter et produkt, som viser sig at være defekt. DiaDent Group International påtager sig ikke ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab forårsaget af ukorrekt brug af produktet. Det er brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed. Brugeren bærer ansvar og risiko i forbindelse hermed.



DiaDent Europe B.V., Antennestraat 70, 1322AS Almere, the Netherlands,
Tel: 31-36-549-8607, www.diadent europe.com, diadent@diadent europe.com



DiaDent Europe B.V., Antennestraat 70, 1322AS Almere, the Netherlands,
Tel: 31-36-549-8607, www.diadent europe.com, diadent@diadent europe.com

Forhandling i DK:

Zenith Dental ApS, Byggebjerg 8, 6534 Agerskov

Telefon: 7483 3404, Email: mail@zenith-dental.dk; www.zenith-dental.dk